



as human, for human  
PARAMOUNT BED

さらに姿勢保持しやすい、  
ティルト・リクライニング搭載。




## Gra-Fitシリーズ車椅子に「ティルト・リクライニング」搭載モデル、新登場。

座るだけで身体にフィットするグラフィットシステムにティルト・リクライニング機能を加えることで、  
座位が不安定な方(前方・側方に倒れてしまう方など)が座れるように配慮しています。

### グラフィットシステム

バックサポートに独自の伸縮式インナーベルトを採用。

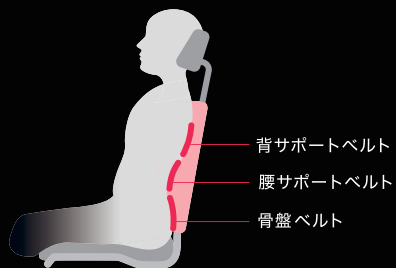

特別な調節をしなくても、座るだけで身体に自然とフィットして、しっかりと姿勢を支えます。インナーベルトは骨盤、腰、背、3つのキーポイントに対応することで、より快適に長く座って過ごすことができます。


### ティルト・リクライニング

ティルト機能



バックサポートと座面の角度を保ったまま後方に傾けられます。

リクライニング機能

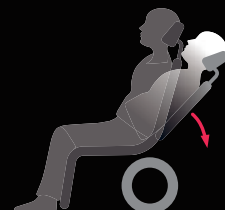

バックサポートだけを後方に傾けられます。

ご利用者様に合った姿勢が保持しやすく、またベッドに戻ることなく車椅子で休息できます。ティルト・リクライニング機能を使ってときどき姿勢を変えてあげることで、同じ部位に体圧がかかり続けられないようになります。

## グラフィットシリーズ車椅子「ティルト・リクライニング」搭載モデル

### バックサポート張り調節

独自の伸縮式インナーベルトによる「グラフィットシステム」

### アームサポート

高さ調節、取り外しが可能

### フット・レッグサポート

スイングイン、スイングアウト、取り外し、フットプレートの高さ調節が可能

\*エレベータリングユニットはオプション(別売)で用意しています。



### ヘッドサポート

上下・前後の位置と仰角の調節が可能

### 手押しハンドル/介助ブレーキ

ティルト・リクライニングしたときにも操作しやすい角度調節機能付き

### ティルトレバー(赤) リクライニングレバー(青)

ティルト、リクライニングそれぞれ30°まで調節可能。ティルトとリクライニングを組み合わせれば、バックサポートは最大で60°まで倒せます

### 足踏み式駐車ブレーキ

### ノーパンクタイヤ

### 転倒防止装置

## 寸法

| 製品コード                       | タイプ                       | 重量   | 座幅 | シート奥行 | 前座高 | アームサポート高        | 全幅 | 全高  | 全長  | ティルト角度 | リクライニング角度 | キャスター | タイヤ後輪 |     |
|-----------------------------|---------------------------|------|----|-------|-----|-----------------|----|-----|-----|--------|-----------|-------|-------|-----|
|                             |                           | kg   | cm | cm    | cm  | cm              | cm | cm  | cm  | 度      | 度         | インチ   | インチ   | cm  |
| KZ-214830<br>(00170-001569) | ティルト・リクライニング式/<br>介助式/固定車 | 21.0 | 40 | 40    | 45  | 3・18-32(2cmピッチ) | 54 | 115 | 111 | 30     | 30        | 6     | 12    | 3.5 |
| KZ-214840<br>(00170-001570) | ティルト・リクライニング式/<br>介助式/固定車 | 21.5 | 45 | 42    | 45  | 3・18-32(2cmピッチ) | 59 | 115 | 113 | 30     | 30        | 6     | 12    | 3.5 |

## オプション



エレベータリングユニット KZ-229811  
TAISコード: 00170-001571

挙上式・開き式・着脱式のフットレッグサポートです。

IVポールセット KZ-229812  
TAISコード: 00170-001572

IVポールとIVポールホルダーのセットです。

※車椅子本体、オプション製品ともにすべてオープン価格です。 ※車椅子本体は「非課税」です。オプション製品は車椅子本体とセットで購入する場合に限り「非課税」となります。

# パラマウントベッド株式会社

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号

☎03(3648)1111(代)

東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号

☎03(3648)1171(代)

札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11

☎011(271)1181(代)

仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3

☎022(239)5211(代)

さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1

☎048(878)0100(代)

横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号

☎042(795)8800(代)

名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号

☎052(963)0600(代)

大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号

☎06(6443)8791(代)

高松営業所 〒761-8031 高松市郷東町223番1

☎087(881)8900(代)

広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号

☎082(293)1311(代)

福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号

☎092(461)1131(代)

製品のお求め、ご相談は……



### 安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

K21-C00764